

# Autoclave Lorma

AV07 Acero 12 L



Alta tecnología al servicio de la salud.



**Garantía de 2 años**

*directo con Lorma*



## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Esterilización a vapor.
- ✓ Control de ciclos de esterilización por microcontrolador.
- ✓ Cámara y charolas en acero inoxidable.
- ✓ Capacidad 12 Lts.
- ✓ Lectura de todas las variables en display LCD.
- ✓ Tres programas de esterilización y programa de Secado.

### Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV  
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,  
CP 07580 CDMX México  
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



### US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC  
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166  
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



[www.tudepositodental.com](http://www.tudepositodental.com)



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



[ventas@tudepositodental.com](mailto:ventas@tudepositodental.com)



55 3269 8800

# Autoclave Lorma

## AV07 Acero 12 L




Alta tecnología al servicio de la salud.

Grupo LORMA pone a su alcance lo último en equipo de esterilización a vapor, el modelo AV07 permite una completa y fácil esterilización. Diseñado y programado de acuerdo a las recomendaciones de: UNITED STATES PHARMACOPEIA (USP), AMERICAN DENTAL ASSOCIATION (ADA) Y NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM).

Pantalla de Cristal Líquido o LCD para un mayor control en el monitoreo de los ciclos de esterilización.

Puede observar: temperatura, tiempo, presión, estado de trabajo del equipo y 3 programas de esterilización\*.

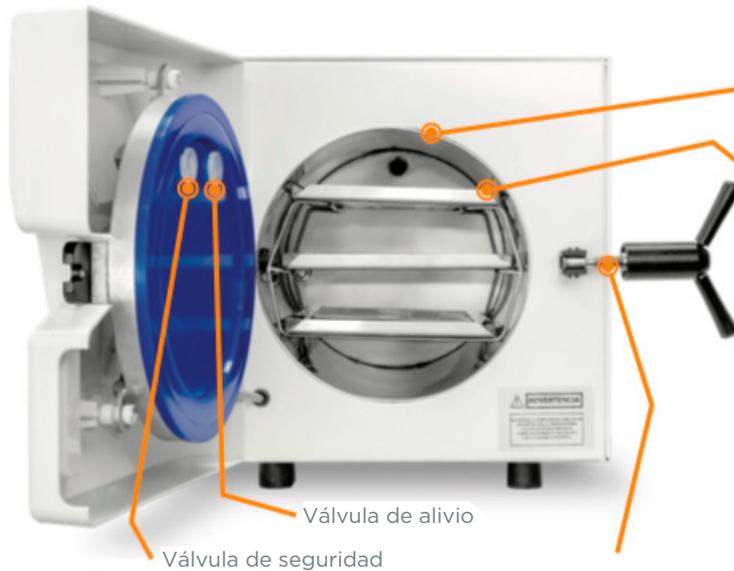

Cámara interna cilíndrica fabricada en acero inoxidable, además reúne las normas internacionales para ser utilizada en laboratorio y área médica.

La capacidad es para tres charolas, con volumen de la cámara interna de 12 lits.



El sellado de la puerta es a presión, garantizando una mayor seguridad de operación.



### Programas de esterilización:

Programa	°C	Tiempo (minutos)	Presión (Kg/cm <sup>2</sup> )	Secado 30 min.
1	135	10	2.4 - 2.6	Si
2	132	15	2.2 - 2.4	Si
3	121	30	1.2 - 1.4	Si

Fabricado y diseñado con un microcontrolador, dando control absoluto en el sistema de operación y ciclos de esterilización sin ningún error. Aunado a lo anterior y en conjunto con el led indicador de trabajo forman parte de un mejor manejo, seguridad y confianza para la esterilización de su material.

Equipo Dimensiones	Charolas Dimensiones	Cámara Dimensiones	Eléctico	Datos
Altura: 35.5 cm	Charola 1: 17 x 32 cm	Profundidad: 34 cm	Alimentación: 127V - / 60Hz.	Agua: Destilada
Ancho: 33 cm	Charola 2: 18.5 x 32 cm	Diámetro 21.5 cm	Potencia: 1150 W	Temperatura máx.: 145°C
Largo: 63 cm	Charola 3: 17 x 32 cm		Fusible: 10A Europeo	Sensor de presión: 0-7 Kg/cm <sup>2</sup>
				Vaso dosificador: 150 ml.
				Sellado puerta: Silicón grado higiénico
				Manguera: Reforzada 5/16"
				Válvula de seguridad 3.5 Kg/cm <sup>2</sup>