



Colores de tapiz

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Consultorio ambidiestro.
- ✓ Selección automática de la puntas, controlada por un bloque de accionado neumático (sistema BAP).
- ✓ Soporte de puntas.
- ✓ Alma estructural en acero, cuerpo y capas en ABS.
- ✓ Bandeja en acero inoxidable.
- ✓ Terminal para micro motor sin spray.
- ✓ Terminal para alta rotación.
- ✓ Jeringa triple.
- ✓ Mangueras lisas, livianas y flexibles.
- ✓ Brazo biarticulado. Promociona los movimientos horizontal y vertical, que facilitan el trabajo de los cirujanos dentistas (exclusivo para el Equipo Air).

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800



Sillón:

- ✓ Asiento y apoyo con movimientos de subida y bajada.
- ✓ Asiento con altura mínima de 34 cm y altura máxima de 73 cm.
- ✓ Sistema de respaldo y asiento accionado por moto-reductor.
- ✓ Sistema pantográfico de elevación.
- ✓ Brazos derecho e izquierdo.
- ✓ Activación del reflector en el pedal de comando (una intensidad).
- ✓ Apoyo de cabeza biarticulado.
- ✓ Base de la silla en chapa de acero maciza.
- ✓ Lámina del apoyo de cabeza cromada.
- ✓ Superficies metálicas con baño de protección antióxido.
- ✓ Superficies aparentes con pintura lisa.
- ✓ Transformador de 12V para alimentación de reflector.
- ✓ Acolchado revestido en PVC laminado - lavable y sin costuras.

Pedal de mando:

- ✓ Mejora el trabajo de los cirujanos dentistas con las funciones de vuelta a cero / posición de trabajo totalmente automatizadas.

Reflector:

- ✓ Monofocal.
- ✓ Cabezal con manija incorporada.
- ✓ Lámpara halógena.
- ✓ Intensidad de iluminación de 20.000 lux.
- ✓ Sistema de cambio fácil de lámparas.
- ✓ Espejo multifacetado con tratamiento multicoating (distribución uniforme de la luz fría).



Apoyo de cabeza bi-articulado:

- ✓ Apoyo de cabeza biarticulado, facilita la atención de discapacitados y niños.
- ✓ Suave, anatómico, con líneas redondeadas, ofrece mayor comodidad al paciente, especialmente en sesiones demoradas.



Unidad de agua:

- ✓ Sistema Venturi
- ✓ Sistema Vac Plus, cuatro veces más potente que el Venturi, genera mejor desempeño para el profesional (opcional).
- ✓ Suctor AP (Alta Potencia), 10 veces más potentes que el Suctor Venturi con ayuda de bomba de vacío (Opcional)
- ✓ Programa de tiempo para llenado automático de vasos y circulación automática del agua del lavadero.
- ✓ Escupidero en cerámica con formas redondeadas para mayor seguridad.
- ✓ Abertura lateral (facilita la aproximación de la ASB "Auxiliar de Salud Bucal") y removible (Ofrece perfecta desinfección de los componentes).
- ✓ Porta vasos.
- ✓ Soporte de puntas.
- ✓ Separadores de residuos.



ESCANEA Y DESCUBRE
MANUAL PRE-INSTALACIÓN




Preinstalación

Dabi Atlante



Roentgen

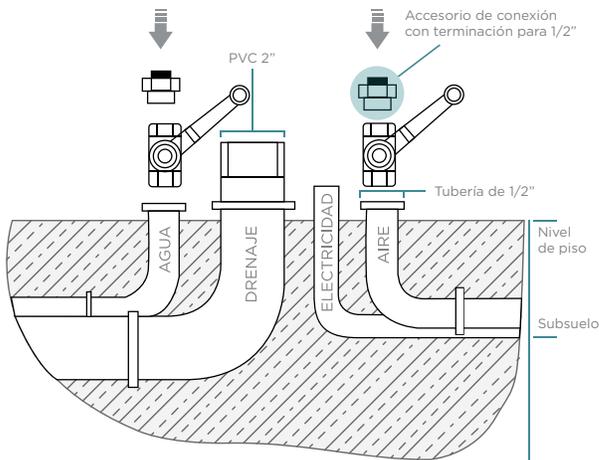

NOMBRE	ESPECIFICACIÓN	NIVEL DE PISO
Aire	Tubo de cobre de 1/2" con terminación rosca interna, se sugiere instalar llave de paso.	5 cm
Agua	Tubo de cobre de 1/2" con terminación rosca interna, se sugiere instalar llave de paso.	5 cm
Drenaje	Tubo de PVC 2" con declive mínimo de 2%.	5 cm
Contacto Eléctrico	Contacto para clavija de uso rudo / alimentación 127 V.	10 cm
Compresor	Libre de aceite de 1 HP mínimo, tanque de 37 lt o mayor, desplazamiento mayor a 87 lt/min, calibrado de 80-120 PSI. Si el compresor se encuentra a más de 5 metros es necesario utilizar tubo de 1/2" y a más de 10 metros tubo de 3/4" <i>Si no se purga el compresor después de la jornada laboral pierde garantía.</i>	
NOTA	Si la preinstalación no se encuentra conforme a lo estipulado anteriormente no se garantiza el óptimo funcionamiento de la unidad dental y por lo tanto <i>pierde la garantía.</i>	

