

Endo Motor con Localizador Apical

Roentgen RTG-RSP



Roentgen



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Motor ultrapreciso de origen alemán, bajo ruido y vibración.
- ✓ Ensamblado en Asia bajo rigurosas certificaciones de calidad.
- ✓ Gran pantalla OLED colorida, todos los ángulos visibles.
- ✓ Cuatro modelos de trabajo:
 - Medición de la longitud del canal radicular solo.
 - Ampliación del canal radicular solo.
 - Movimiento rotatorio alternativo.
 - Medición y ampliación de la longitud del canal radicular.
- ✓ Seis funciones: Capacidad de medición de longitud de multifrecuencia, Ampliación normal, Inversión automática en zona apical, Movimiento alternativo, Desaceleración automática en zona apical, Arranque / parada automáticos del motor.
- ✓ Los accesorios principales incluyen: pieza de mano contrángulo, porta limas, gancho de labios y cable de medición, que se pueden esterilizar a alta temperatura y presión para evitar infecciones cruzadas.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (0155) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800


Endo Motor con Localizador Apical

Roentgen RTG-RSP




Roentgen


Accesorios principales.

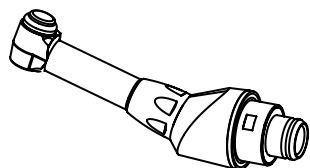


a) Contrángulo

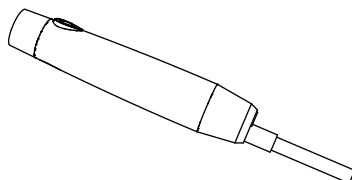


b) Pieza de mano del motor

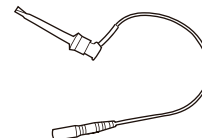


c) Porta limas

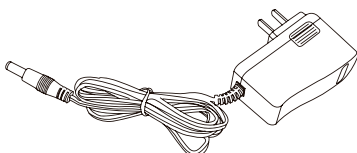


d) Adaptador

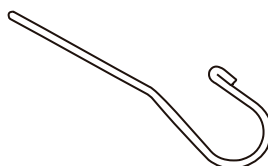


e) Gancho de labios

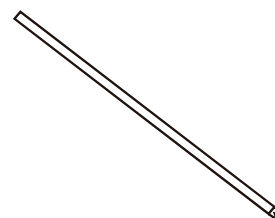


f) Sonda táctil

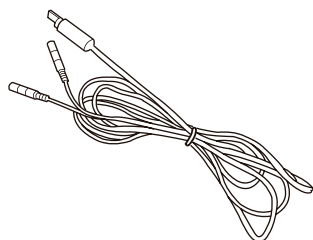

g) Cable de medición

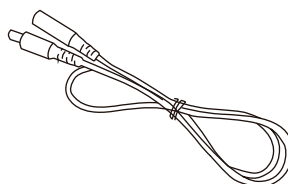

h) Cable de medición de una sola cabeza

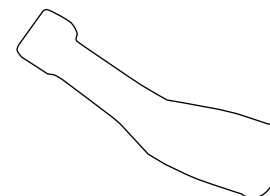

i) Cubierta de silicona

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería	7.2V / 1500mAh
Adaptador	~100V - 240V 0.8A 50Hz / 60Hz
Velocidad de giro	200~600 rpm
Torque	0.6~4.0 N.cm
Alerta de timbre	El zumbador alertará cuando la lima esté a menos de 2 mm del ápice.
Condición de operación	a) Temperatura ambiente: 0 ~ 40°C. b) Humedad relativa: 10 ~ 85% RH. c) Presión de la atmósfera: 70kPa ~ 106kPa.



MANUAL DE USO



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800