

Lámpara Fotocurado Led Inalámbrica

Roentgen RTG-B200

Roentgen®



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

- ✓ LED de 5W de alta potencia.
- ✓ Se puede usar con enchufe si la batería no es suficiente.
- ✓ Membrana de Fibra óptica de vidrio.
- ✓ Retención de carga de la batería 90 días o más.
- ✓ 3 modos de uso: fuerte, intermitente, gradualmente fuerte.
- ✓ Batería de litio de gran capacidad.
- ✓ Adecuado para todas las marcas de materiales de resina.
- ✓ Fotocura hasta 200 veces con una sola carga.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com




55 3269 8800

Lámpara Fotocurado Led Inalámbrica

Roentgen RTG-B200

Roentgen®

POWER

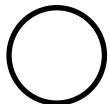

Interruptor de encendido



Alerta de batería baja



Indicador de luz de modo fuerte




Indicador de luz de modo parpadeante



Indicador de luz de modo gradualmente fuerte

MENU

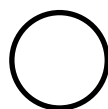

Interruptor de selección de modo

20

Se puede ajustar en 5-40 segundos, se apaga automáticamente.
Sin ninguna operación en 20 segundos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Voltaje de la batería: 3.7V
- ✓ Peso bruto: 0.57Kg
- ✓ Temperatura adecuada: 5°C - 50°C
- ✓ Voltaje de entrada: 110V - 240VAC, 50 - 60Hz
- ✓ Voltaje de salida: DC4.2V
- ✓ Intensidad de luz: 1200-2000mw/cm
- ✓ Humedad relativa: <80%
- ✓ Tiempo y profundidad de solidificación: 5s/3mm
- ✓ Longitud de onda de luz: 420-480nm
- ✓ Batería: Batería de iones de litio
- ✓ Capacidad de la batería: 1500mAh



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800