

Localizador de Apice

Woodpecker Woodpex III



Garantía de 1 año


CARACTERÍSTICAS

- ✓ Equipado con clara LCD brillante, imagen clara y color diferente indican la trayectoria del archivo con claridad.
- ✓ Basado en red de frecuencia tecnología avanzada de medición de impedancia múltiple y calibración automática asegura las medidas son exactas.
- ✓ Clip Autoclavable archivo, gancho de archivo, sonda de archivo. Cómo evitar la infección cruzada con eficacia.
- ✓ Plegable, fácil de ajustar el ángulo visual.


- ✓ La batería es recargable, no es necesario reemplazar la batería en varias ocasiones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:


- ✓ Voltaje: 3.7V / 750 mAh.
- ✓ Consumo de Energía: < 0.5W.
- ✓ Pantalla: LCD de 4.5".
- ✓ Peso: 336g.
- ✓ Dimensiones: 84mm x 88mm x 112mm.

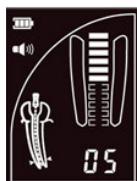

Cuando el archivo alcanza la región delantera del foramen apical, las barras blancas muestran.

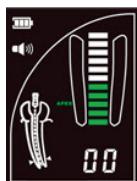

Cuando el archivo se ha ido a la posición cerca del foramen apical, las barras verdes muestran.

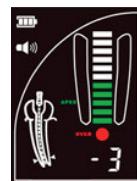

Cuando el archivo ha excedido el foramen apical, las barras rojas mostradas. Un pitido continuo se generará al mismo tiempo.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800