

# Motor Para Endodoncia Con Contrangulo NSK Endomate DT



**Garantía de 1 año**

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Apto para todas las marcas populares de limas Ni-Ti.
- ✓ Control de Torque, con función de reversa automática.
- ✓ Unidad de mesa compacta.
- ✓ Una amplia pantalla provee gran visibilidad.
- ✓ El panel de control plano permite un manejo sencillo y fácil.
- ✓ 2 fuentes de energía (Cable AC / batería recargable).
- ✓ Pieza de mano liviana, elegante y confortable.
- ✓ Práctica tecla ON/OFF (Encendido/Apagado).

El ENDO-MATE DT ha sido desarrollado para ser usado con todas las marcas de limas Ni-Ti.

Las funciones pre-programadas permiten tratamientos altamente eficientes usando limas de diferentes fabricantes. La unidad de control ha sido diseñada para que sea liviana y compacta. Ella está equipada con una batería recargable que provee gran libertad.

### Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV  
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,  
CP 07580 CDMX México  
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



### US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC  
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166  
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



[www.tudepositodental.com](http://www.tudepositodental.com)



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



[ventas@tudepositodental.com](mailto:ventas@tudepositodental.com)




55 3269 8800

# Motor Para Endodoncia Con Contrangulo NSK Endomate DT



## 6 ÁNGULOS DE CABEZAL PARA FÁCILES TRATAMIENTOS

Dependiendo del sitio de tratamiento, el ángulo del cabezal puede ser ajustado en el mejor ángulo.

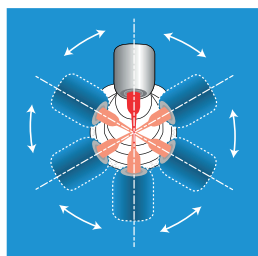

## ACOPLO RÁPIDO

El acoplo rápido permite fácil reemplazo del cabezal. Todos los cabezales son esterilizables en autoclave hasta máximo de 135°C.



## CABEZAL ULTRA MINIATURA TIPO PRESIÓN

Permite rápido y fácil reemplazo de limas durante los procedimientos.

El cabezal compacto ofrece una excelente visibilidad de los puntos de tratamiento.



## Tecla de 2 vías ON/OFF (Encendido/Apagado)

Las características son:

A: Oprima y libere: El micromotor funciona en forma continua hasta que la tecla es oprimida de nuevo.

B: Mantenga oprimida: El micromotor funciona en forma continua hasta que la tecla es liberada.



## APTO PARA TODAS LAS MARCAS POPULARES DE LIMAS NI-TI

Más de 9 selecciones (velocidad y torque, etc.) pueden ser programados simplemente con la presión de la tecla de Memoria. Es fácil cambiar entre cada programa preajustado, permitiendo trabajar con limas de los más populares fabricantes que el procedimiento requiera.

Transmisión	Velocidad del cabezal (min <sup>-1</sup> )
20:1	100-650
16:1	125-800
10:1	200-1,300
4:1	500-3,200
1:1	2,000 ~13,000

## CONTROL DUAL ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)

El funcionamiento ON/OFF (Encendido/Apagado) del motor es seleccionado con la tecla manual localizada en el cuerpo de la pieza de mano, o controlado con el pedal de acuerdo a la elección del usuario. (El pedal es opcional).



# Motor Para Endodoncia Con Contrangulo NSK Endomate DT



## FUNCIÓN REVERSA AUTOMÁTICA

La función Reversa automática es activada cuando el nivel del torque preajustado ha sido excedido, y puede ser seleccionado para funcionar en los siguientes modos:



(Automáticamente continuo)  
El motor retorna a la rotación directa después que la reversa automática ha liberado la lima.



(Parada automática)  
El motor se detiene después que la reversa automática ha liberado la fresa.



Alternativamente, la función de reversa automática puede ser desactivada.

## 2 FUENTES DE ENERGÍA

El ENDO-MATE DFT ha sido diseñado para trabajar con una batería recargable para usos portátiles, o puede funcionar usando el adaptador AC suministrado en el set.


## OTRAS FUNCIONES

Los pitidos avisan al usuario cuando el torque límite preajustado ha sido excedido.

Función de OFF (Apagado) automático (después de inactividad de 10 minutos.

El estado de la batería es visualizada en la pantalla.)

**EL PANEL DE CONTROL PLANO PERMITE UN MANEJO SENCILLO Y FÁCIL**

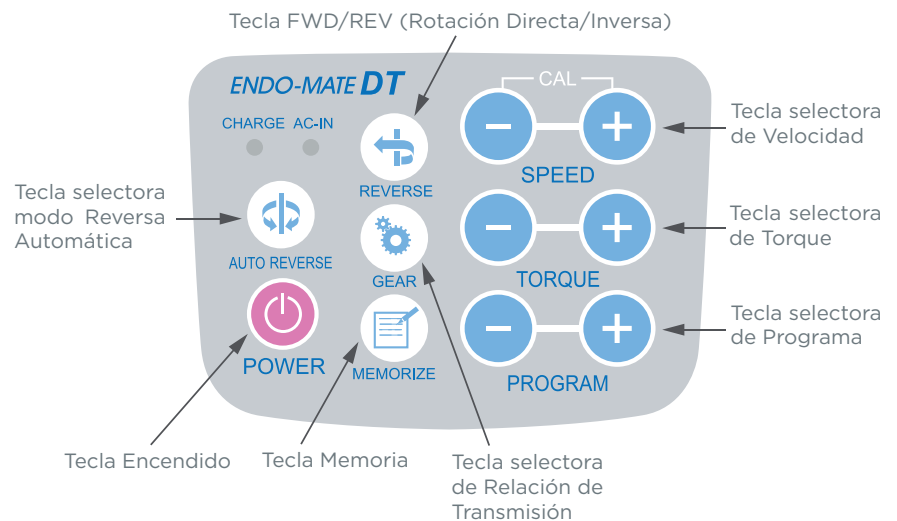

**UNA AMPLIA PANTALLA PROVEE GRAN VISIBILIDAD**

