

Motor Para Implantes

NSK Surgic AP



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

Micromotor Compacto, Corto y Liviano

Este micromotor liviano, combinado con el excepcional equilibrio, reduce notablemente la fatiga de la mano y de la muñeca, causada por procedimientos prolongados y complejos. Perfecto para todos los tamaños de mano.

210 W de Gran Potencia y 50 Ncm de Poderoso Torque

La relación de alta potencia (210 W), elevado Torque (50 Ncm) y el amplio rango de velocidad (200 a 40.000 min-1), ofrece la flexibilidad necesaria para satisfacer la demanda exacta para todos los procedimientos de la cirugía oral.

Excelente Durabilidad y Esterilización por Autoclave

El micromotor SG50MS puede ser repetidamente esterilizado por autoclave y por termodesinfectante, ofreciendo excelente durabilidad y fiabilidad.



Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

Motor Para Implantes

NSK Surgic AP



8 Programas Individuales Opcionales

Surgic AP de NSK puede memorizar 8 programas opcionales completos. Cada programa incluye velocidad, Torque, flujo de refrigerante y dirección de rotación. La configuración del programa continúa almacenado incluso cuando se apague la fuente de alimentación. Cada configuración del programa puede ser alterado, mientras que la unidad se encuentre en funcionamiento. Los nuevos programas pueden ser memorizados fácilmente pulsando la tecla de la memoria.

Potente Bomba Externa

Surgic AP le garantiza óptima capacidad de irrigación y montaje sencillo con una potente bomba externa. La bomba de Surgic AP es fácilmente desmontado y puede ser esterilizado repetidamente por autoclave.



Surgic AP No-Óptico Sets Completos Con Contra ángulo S-Max SG20

- ✓ MODELO **Surgic AP (120V)** CÓDIGO PEDIDO **Y1413701**
- ✓ MODELO **Surgic AP (230V)** CÓDIGO PEDIDO **Y1413711**


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

UNIDAD DE CONTROL

- ✓ Salida Máx. / Torque Máx.: 210 W / 50 Ncm
- ✓ Fuente de Alimentación: AC120V o 230V 50/60 Hz
- ✓ Salida Máx. Bomba Irrig.: 75 mL / min
- ✓ Programas: 8 Programas
- ✓ Tamaño: L275 x A207 x H101 mm

Gran Panel LCD de Fácil Uso

El Gran Panel LCD ofrece reconocimiento inmediato de los datos del programa operacional seleccionado.

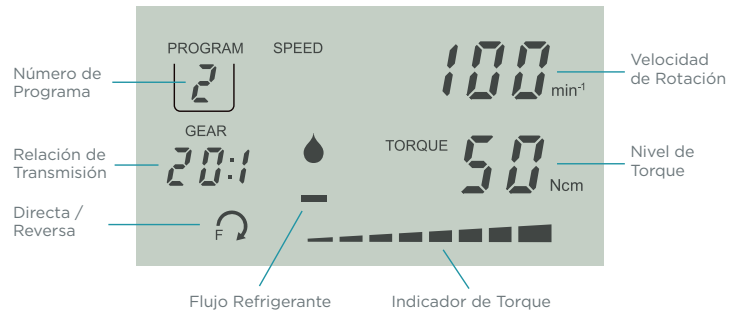

Control de Pie de Fácil Uso

Control de Pie de Fácil Uso para el Surgic AP El Control de Pie del Surgic AP (FC-55) es sencillo de operar y está conforme a IPX8, el estándar para los controles de pie de instrumentos médicos y certificación para uso en el quirófano (sólo rotación directa).



Contenido

- ✓ Unidad de Control
- ✓ Micromotor No-Óptico (SG50MS)
- ✓ Contra ángulo SG20 (Reducción 20:1)
- ✓ FC-55 Control de Pie (Certificado IPX8)
- ✓ Soporte de Pieza de Mano
- ✓ Tubo de Irrigación (5 pcs.) y Otros Accesorios

Micromotor (SG50MS)

- ✓ Velocidad del Motor: 200-40.000 min⁻¹
- ✓ No-Óptico
- ✓ Sin Escobillas

Control de Pie (FC-55)

- ✓ Control de Velocidad: Variable
- ✓ Certificado IPX8