

Pieza De Mano Alta Vel.

NSK Panamax 2



Garantía de 6 meses

CARACTERÍSTICAS

Además de conservar los atributos que usted ya conoce, la nueva Panamax2 ofrece Más Resistencia y Más Potencia, su rediseño elegante brinda una máxima visibilidad y accesibilidad del campo de trabajo; volviendo el procedimiento más rápido, fácil y comfortable.

Piezas de repuesto



Lavable en el termodesinfectador



Estерilizable en el autoclave hasta 135° C

MODELO	PRODUCTOS
Llave tapa cabezal	
Boquilla de punta	

MODELO	PRODUCTOS
Turbina de reemplazo	
Tapa de reemplazo	

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

Pieza De Mano Alta Vel.

NSK Panamax 2



Conexión directa / Por enroscada
 VELOCIDAD: 380,000 - 480,000 min.-1 (rpm)




M4 MIDWEST 4 VIAS



B2 BORDEN 2 VIAS

Diseño esbelto de Acero Inoxidable

Diseño esbelto que garantiza una excelente accesibilidad a toda la cavidad bucal y maximiza la visibilidad del campo de trabajo.

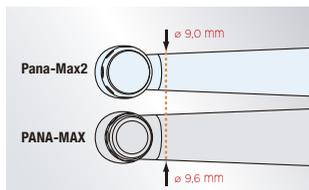

Control de Infecciones

Por su exclusivo sistema Clean Head no permite la entrada de fluidos orales y otros contaminantes al mecanismo.



Cartuchos fácilmente intercambiables

Los cartuchos de Panamax2 son duraderos y fáciles de cambiar, lo que ayuda a controlar costos y minimizar tiempos de inactividad. Una vez que el cartucho ha sido remplazado, la pieza de mano funciona como nueva.




Sistema Ultra Push Chuck

Su exclusivo sistema de agarre permite reemplazar la fresa fácilmente. El mecanismo de bloqueo automático asegura que la fresa permanezca en su lugar aún cuando se le aplique una carga de torque más alta durante el procedimiento.



Durabilidad Insuperable

Le evolución de la Panamax2 comienza en el diseño de su cabezal de acero inoxidable altamente resistente al impacto. La turbina no sufrirá daño alguno aún si la Pieza de Mano cayera accidentalmente desde una altura de 2 metros contra un piso de cemento.

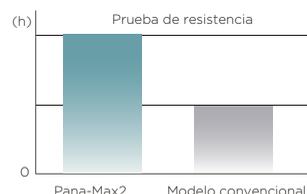

25% Potencia extra

Espectacularmente más potente que sus predecesores. Con una potencia concentrada máxima de 20 watts, Panamax2 posee la potencia nominal máxima en su categoría; y en conjunto con la alta precisión de rotación de la fresa se crea un efecto sinérgico que lleva a tratamientos rápidos y precisos.

