

Unidad Dental

Peymar Luxor



ÚNICA MARCA MEXICANA
CERTIFICADA EN ISO 9001



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Lámpara de led con sensor e interruptor**
- ✓ Cabezal articulado de metal
- ✓ Tapicería ergonómica, colchón en espuma de poliuretano
- ✓ Brazo derecho abatible**
- ✓ Motores silenciosos apoyados con pistón neumático para menor desgaste con capacidad de 200 kg de aguante.
- ✓ Base en placa con ajustadores para mayor estabilidad.
- ✓ Controles de mando para movimientos del sillón en bandeja de instrumentos y pedal al piso*
- ✓ Cubiertas de fibra de vidrio.
- ✓ Pintura de poliuretano alto brillo resistente a químicos y corrosión (No cambia de color, 100% blanco).
- ✓ Banquillo neumático con respaldo ajustable.
- ✓ Escupidera de cerámica desmontable.
- ✓ Sistema de agua médica con indicador de presión para botella**
- ✓ Brazo de asistente abatible con eyectores y jeringa triple**
- ✓ Bandeja de instrumentos amplia con brazo de suspensión para ajuste de altura**
- ✓ Entrada para piezas de alta / baja velocidad y jeringa triple; conexión rápida de agua para cavitron**
- ✓ Manguera de poliuretano con forro de silicón**
- ✓ Eyectores Ventury y quirúrgico automáticos, con recolector de residuos**

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://facebook.com/deposito.dental.roentgen)





ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

Preinstalación

Peymar

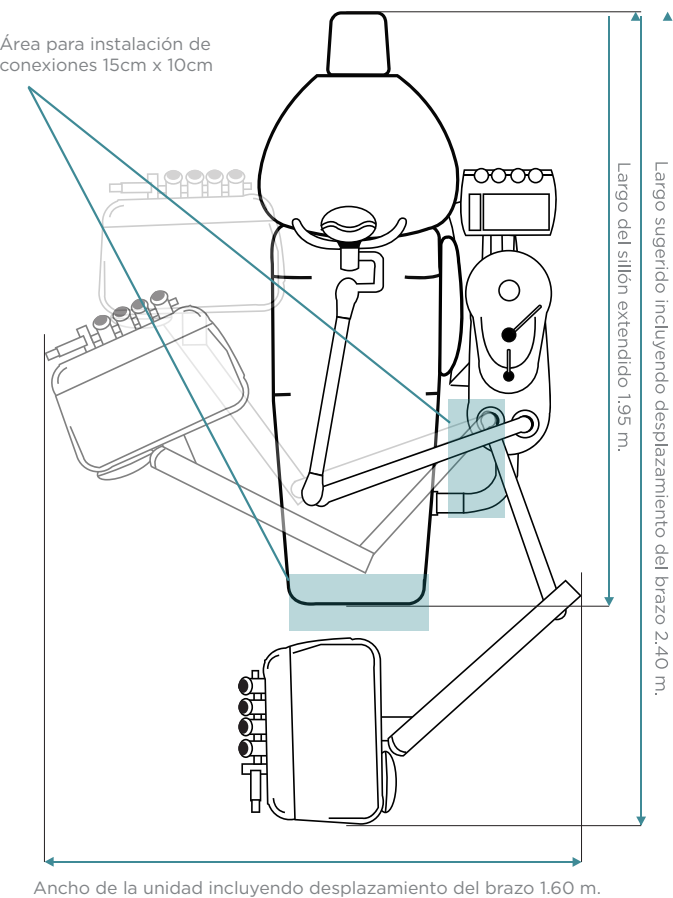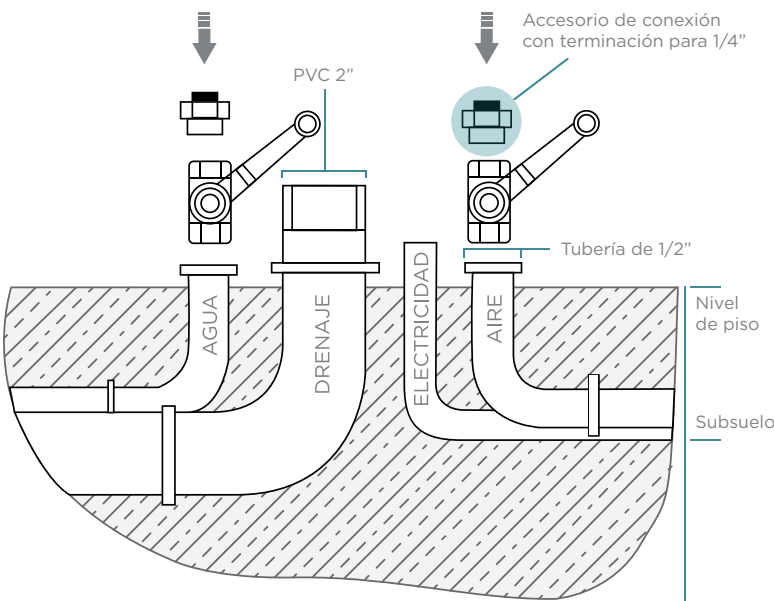

NOMBRE	ESPECIFICACIÓN	NIVEL DE PISO
Aire	Tubo de cobre de 1/2" con terminación 1/4", se sugiere instalar llave de paso.	5 cm
Agua	Tubo de cobre de 1/2" con terminación 1/4", se sugiere instalar llave de paso.	5 cm
Drenaje	Tubo de PVC 2" con declive mínimo de 2%.	5 cm
Contacto Eléctrico	Contacto monofasico polarizado de uso rudo / alimentación 127 V.	10 cm
Compresor	Libre de aceite de 1 HP mínimo, tanque de 37 lt o mayor, desplazamiento mayor a 87 lt/min, calibrado de 80-120 PSI. Si el compresor se encuentra a más de 5 metros es necesario utilizar tubo de 1/2" y a más de 10 metros tubo de 3/4" <i>Si no se purga el compresor después de la jornada laboral pierde garantía.</i>	
NOTA	Si la preinstalación no se encuentra conforme a lo estipulado anteriormente no se garantiza el óptimo funcionamiento de la unidad dental y por lo tanto pierde la garantía.	

¿Requieres de Soporte Técnico?

Contáctanos a los siguientes datos, y con gusto te atenderemos.

- Tel: 01 (222) 284 08 43
- Fax: 01 (222) 762 91 69
- Cuahutémoc Sur No. 1341 Tlaxcalcingo, Puebla.

