

Unidad Dental

Roentgen RTG-3000



Roentgen



TRIMODULAR:

- ✓ Brazo Neumático.
- ✓ Membrana táctil con comandos para controlar los 4 movimientos básicos de la unidad incluyendo las 2 memorias.
- ✓ Comandos electrónicos para lavado de tarja y llenavaso.
- ✓ Charola con amplio espacio.
- ✓ Negatoscopio.
- ✓ Manómetro de salida de aire de las piezas.
- ✓ Reguladores individuales de presión de agua y aire.
- ✓ Jeringa triple.
- ✓ 2 salidas para pieza de mano de alta.
- ✓ Salida para pieza de mano de baja.
- ✓ Salida extra para colocar cavitron (no incluido).
- ✓ Caja de conexiones con filtro de aire y agua y manómetro de presión de entrada.



ESCUPIDERA

- ✓ Abatible.
- ✓ Desmontable.
- ✓ De Cerámica lisa.
- ✓ Lavado con válvula eléctrica.



MÓDULO ASISTENTE:

- ✓ Eyector convencional.
- ✓ Eyector quirúrgico.
- ✓ Jeringa triple asistente.
- ✓ Lámpara de fotocurado (opcional).
- ✓ Membrana táctil con 4 movimientos básicos de la unidad.
- ✓ Comandos electrónicos para lavado de tarja y llenavaso.



SILLÓN:

- ✓ Tapizado en vinyl termoformado anatómico.
- ✓ Capacidad de levante de más de 180 kg.
- ✓ Motoreductor silencioso.
- ✓ 2 Coderas abatibles.
- ✓ 2 Memorias programadas (posición de trabajo y retorno a cero).
- ✓ Cabezal bi articulado.
- ✓ No requiere fijación al piso.
- ✓ Pedal convencional.
- ✓ Joystick de movimientos básicos fijo en la base la unidad.



REFLECTOR LED:

- ✓ Reflector de 4 LEDS.
- ✓ Hasta 30,000 lux.
- ✓ Libre de sombras.
- ✓ Encendido y apagado por medio de sensor y/o de forma manual.



BANQUILLO:

- ✓ Ergonómico al color de la tapicería.
- ✓ Ruedas y base plásticas.

Colores Disponibles:



Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com




55 3269 8800

Preinstalación

Roentgen



Roentgen

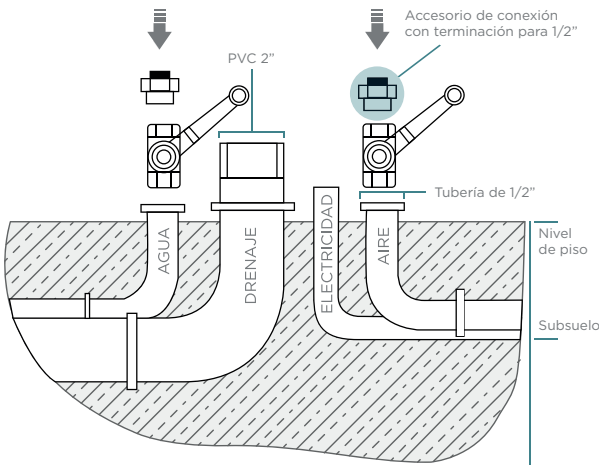

NOMBRE	ESPECIFICACIÓN	NIVEL DE PISO
Aire	Tubo de cobre de 1/2" con terminación rosca interna, se sugiere instalar llave de paso.	5 cm
Agua	Tubo de cobre de 1/2" con terminación rosca interna, se sugiere instalar llave de paso.	5 cm
Drenaje	Tubo de PVC 2" con declive mínimo de 2%.	5 cm
Contacto Eléctrico	Contacto para clavija de uso rudo / alimentación 127 V.	10 cm
Compresor	Libre de aceite de 1 HP mínimo, tanque de 37 lt o mayor, desplazamiento mayor a 87 lt/min, calibrado de 80-120 PSI. Si el compresor se encuentra a más de 5 metros es necesario utilizar tubo de 1/2" y a más de 10 metros tubo de 3/4" <i>Si no se purga el compresor después de la jornada laboral pierde garantía.</i>	
NOTA	Si la preinstalación no se encuentra conforme a lo estipulado anteriormente no se garantiza el óptimo funcionamiento de la unidad dental y por lo tanto <i>pierde la garantía.</i>	

