

Unidad Dental Infantil

Roentgen RTG-326



Roentgen



TRIMODULAR MÓVIL:

- ✓ Ajuste de altura eléctrico.
- ✓ Membrana táctil con comandos para controlar el sillón, memorias, escupidera, calentador de agua y llena vaso.
- ✓ Charola con amplio espacio.
- ✓ Negatoscopio panorámico.
- ✓ Manómetro de salida de aire de las piezas.
- ✓ Reguladores individuales de presión de agua y aire.
- ✓ Jeringa triple.
- ✓ 2 salidas para pieza de mano de alta.
- ✓ Salida para pieza de mano de baja.
- ✓ Ruedas para fácil desplazamiento.
- ✓ Sistema flush de fácil acceso.



ESCUPIDERA

- ✓ Abatible.
- ✓ Desmontable.
- ✓ De cristal templado.
- ✓ Lavado de tarja eléctrico.
- ✓ Llenavaso eléctrico.



SILLÓN:

- ✓ Tapizado en piel con finas costuras.
- ✓ Capacidad de levante de más de 180 kg.
- ✓ Motoreductor silencioso.
- ✓ 2 Memorias programadas (posición de trabajo y retorno a cero).
- ✓ Cabezal bi articulado.
- ✓ No requiere fijación al piso.
- ✓ Pedal chip blower (control de agua y aire independiente).
- ✓ Joystick de movimientos básicos.
- ✓ Bandas sujetadoras para estabilizar al paciente pediátrico.
- ✓ Diseño animado para un ambiente alegre para el paciente.
- ✓ Colores vivos alusivos a un delfin con base simulando olas.



MÓDULO ASISTENTE:

- ✓ Eyector convencional.
- ✓ Eyector quirúrgico.
- ✓ Jeringa triple asistente.
- ✓ Membrana táctil con comandos para controlar el sillón, lavado de escupidera, llena vaso.
- ✓ Lámpara de fotocurado alámbrica.



REFLECTOR LED:

- ✓ Luz Led de 4 emisiones.
- ✓ Hasta 30,000 lux.
- ✓ Libre de sombras.
- ✓ Encendido y apagado por medio de sensor.
- ✓ Manijas desmontables y autoclavables.



BANQUILLO:

- ✓ Ergonómico al color de la tapicería.
- ✓ Ruedas y base acero.



Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**




Preinstalación


Roentgen



Roentgen

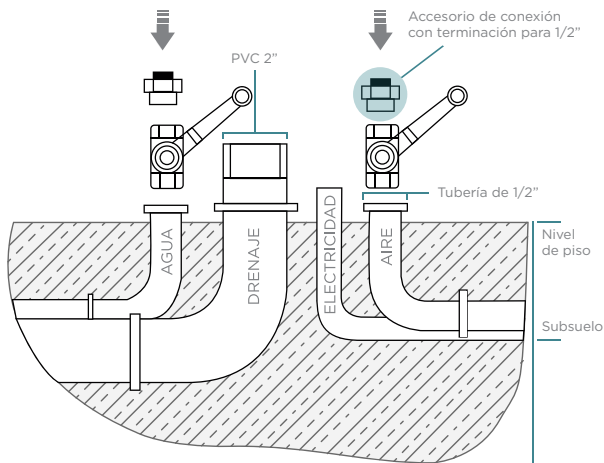

NOMBRE	ESPECIFICACIÓN	NIVEL DE PISO
Aire	Tubo de cobre de 1/2" con terminación rosca interna, se sugiere instalar llave de paso.	5 cm
Agua	Tubo de cobre de 1/2" con terminación rosca interna, se sugiere instalar llave de paso.	5 cm
Drenaje	Tubo de PVC 2" con declive mínimo de 2%.	5 cm
Contacto Eléctrico	Contacto para clavija de uso rudo / alimentación 127 V.	10 cm
Compresor	Libre de aceite de 1 HP mínimo, tanque de 37 lt o mayor, desplazamiento mayor a 87 lt/min, calibrado de 80-120 PSI. Si el compresor se encuentra a más de 5 metros es necesario utilizar tubo de 1/2" y a más de 10 metros tubo de 3/4" <i>Si no se purga el compresor después de la jornada laboral pierde garantía.</i>	
NOTA	Si la preinstalación no se encuentra conforme a lo estipulado anteriormente no se garantiza el óptimo funcionamiento de la unidad dental y por lo tanto <i>pierde la garantía.</i>	

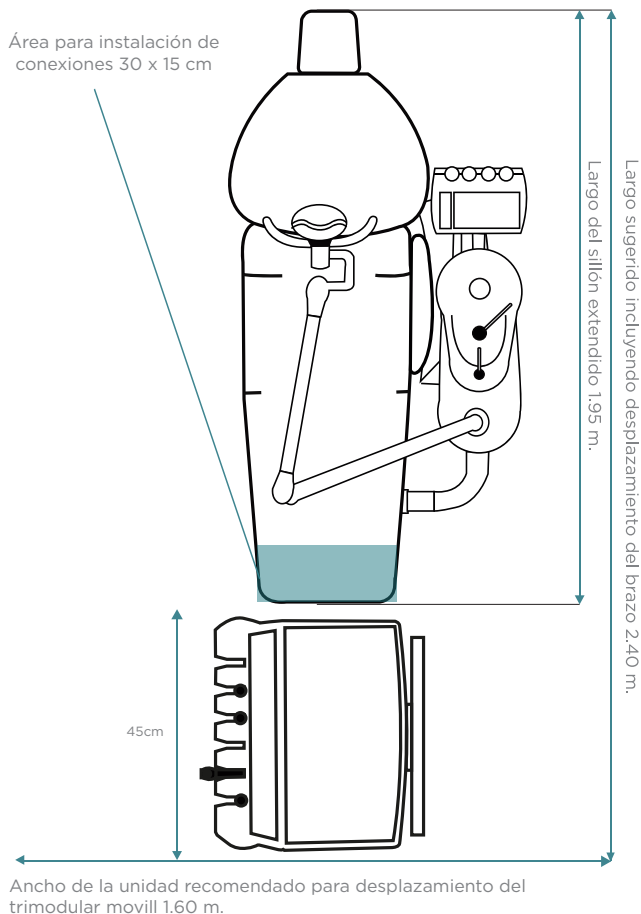

Largo sugerido incluyendo desplazamiento del brazo 2.25 m.

Largo del sillón extendido 1.80m.

